

Produkty neria®

Specyfikacja produktu	neria® pojedyncze wklucie	neria® multi podwójne wklucie	neria® multi potrójne wklucie	neria® multi poczwórne wklucie
Kaniula	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Kąt wklucia	90 stopni	90 stopni	90 stopni	90 stopni
Rozmiar igły	G27, G29	G27	G27	G27
Długość igły	6, 8 i 10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Długość drenu	60, 80, 110 cm	90 cm	90 cm	90 cm
Przylepiec mocujący	Wbudowany	Wbudowany	Wbudowany	Wbudowany
Wypełnienie drenu	60 cm - 0.10 ml 80 cm - 0.13 ml 110 cm - 0.18 ml	0.35 ml	0.40 ml	0.45 ml



Poznaj portfolio neria® i dowiedz się więcej na
www.neriasoft.pl



Opis produktu Instrukcja użytkowania



NOWOŚĆ

Pierwotne niedobory odporności

Zestawy neria®

Wszystkie produkty **neria®** charakteryzuje ich **wysoka jakość**. Ponadto produkty stworzono z myślą o **zgodności z poszczególnymi terapiami** oraz **wygodzie stosowania**, dzięki czemu spełniają wymagania dotyczące prowadzenia prostego, komfortowego, bezpiecznego i skutecznego wlewu.

neria® to zestaw infuzyjny składający się z jednego wkłucia, natomiast **neria® multi** składa się z kilku rozwidlonych wkłuc, wszystkie wkłucia są zakończone igłą ze stali nierdzewnej umieszczone pod kątem 90 stopni. **neria® multi** pozwala na prowadzenie wlewu w kilka miejsc jednocześnie, zapewniając oszczędność czasu. Zestawy zostały specjalnie opracowane i przebadane pod kątem prowadzenia podskórnych wlewów immunoglobulin (IgG) w leczeniu pierwotnych niedoborów odporności.


neria® multi jest dostępna w wersjach z 2, 3 lub 4 rozwidlonymi drenami oraz igłami o różnych rozmiarach, dzięki czemu łatwiej jest dopasować sprzęt do indywidualnych potrzeb pacjentów.

Korzyści

- **Łatwa aplikacja**³
Elastyczny uchwyt ułatwia wkłucie pod kątem 90 stopni
- **Bezpieczne przymocowanie**
Przyjemny dla skóry przylepiec jest częścią zestawu, niweluje on zwijanie się drenu oraz potrzebę użycia dodatkowych opatrunków
- **Minimalizuje ból**^{1,2}
Specjalnie zaprojektowana cienka igła minimalizuje ból podczas wkłucia
- **Niskie straty leków**²
Zastosowanie podwójnego materiału w drenie zapobiega nadmiernym stratom leków¹




Budowa zestawu neria®

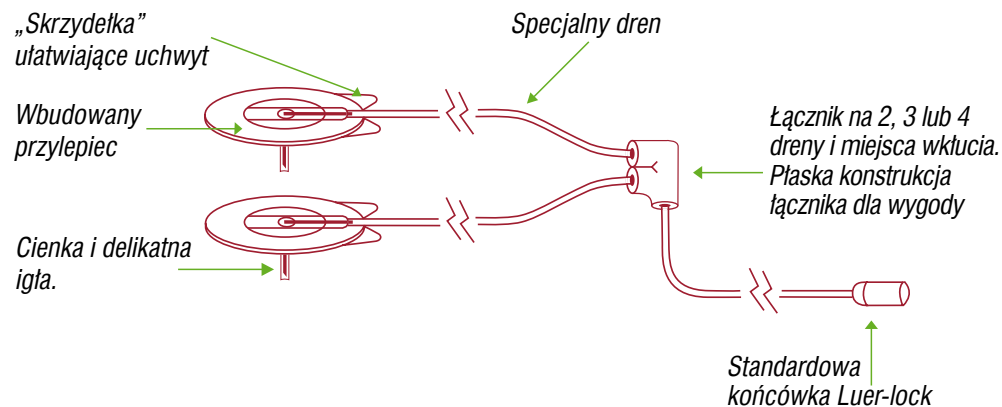


Instrukcja użycia w trzech krokach - zobacz jakie to proste


Zestaw **neria®** zapewnia łatwe i mniej bolesne wkłucie, co ułatwia pacjentom jego samoobsługę¹.

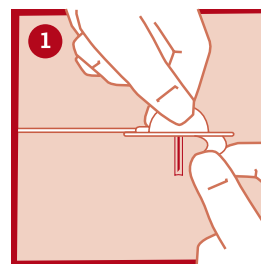

Usun papier zabezpieczający stronę przylepną opatrunku.

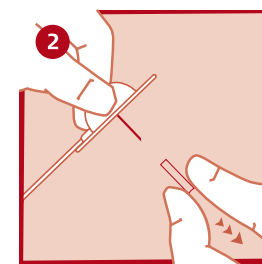

Usun ochronną nakładkę z igły.

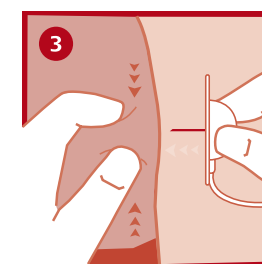

Jedną ręką uchwycić fałdę skóry i wkluj **nerię® multi** prostopadle do miejsca wkłucia.

Uwaga: instrukcja ilustruje tylko niektóre kroki użycia zestawu **neria®** i nie powinna zastępować instrukcji użytkownika dołączonej do opakowania.

¹ neria® multi Usability Protocol 2011. Data on file, Unomedical a/s

² Chan G.C.F., Ng D.M.W. et al. Comparison of Subcutaneous Infusion Needles for Transfusion-Dependent Thalassemia. Patients by the Intrapersonal Cross-Over Assessment Model, Am.J.Hematol. 76:398-404

³ Parsons J., Infusion line preferences of patients prescribed apomorphine for complex Parkinson's disease. British Journal of Neuroscience Nursing, December 2009, Vol 5 No 12

¹ Chan G.C.F., Ng D.M.W. et al. Comparison of Subcutaneous Infusion Needles for Transfusion-Dependent Thalassemia Patients by the Intrapersonal Cross-Over Assessment Model, Am.J.Hematol.76:398-404